

MANUAL DE USUARIO



DINAMÓMETRO ELECTRÓNICO CAMRY Mod: EH101

MANUAL DEL USUARIO

Dinamómetro Electrónico CAMRY EH101

ÍNDICE	Pág.
1. Recomendaciones básicas	3
2. Consejos de uso y mantenimiento	4
3. Modo prueba rápida	4
4. Instrucciones para el uso	4
Especificaciones	5
Características	5
Para cambiar las pilas	6
Lcd. Descripción de los iconos	6
Ajuste previo	7
Para establecer los parámetros de usuario	8
Para poner a prueba en el modo de memoria de usuario	9

1.- RECOMENDACIONES BÁSICAS.

El Dinamómetro Electrónico modelo EH101 es un producto de precisión y por tanto debe ser tratado con sumo cuidado y delicadeza.

El dinamómetro ha sido diseñado con la finalidad de obtener información precisa y fiable de la fuerza que ejerce una persona, para múltiples finalidades.

Primero, verifique el contenido del embalaje. Usted debe encontrar el siguiente material:

- Dinamómetro
- Manual de Usuario

A continuación se indican **LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS MUY IMPORTANTES** para su correcto uso.

1-Asegúrese antes de hacer la medición que tiene como unidad de resultados Kilos, para cambiar de Lb a Kg. Presione ON/SET.

2-El Dinamómetro es un equipo de precisión, trátelo con sumo cuidado y evite cualquier golpe o caída


3-El fabricante recomienda para asegurar el buen estado de funcionamiento, calibrado y conservación del equipo una calibración periódica de 18 meses.

2.- CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Por favor, tenga en cuenta la polaridad cuando sustituya las pilas.
2. Evite tocar el LCD.
3. Si el dinamómetro no se enciende, compruebe que las pilas están correctamente instaladas.
4. Tratar este dinamómetro con cuidado, ya que es un instrumento de precisión.
5. Si el dinamómetro no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, quite las pilas.

3.- MODO PRUEBA RÁPIDA

Pulse el botón "ON / SET" 3 segundos para apagarlo. El Auto-apagado se produce si el LCD muestra la misma lectura durante 20 segundos.

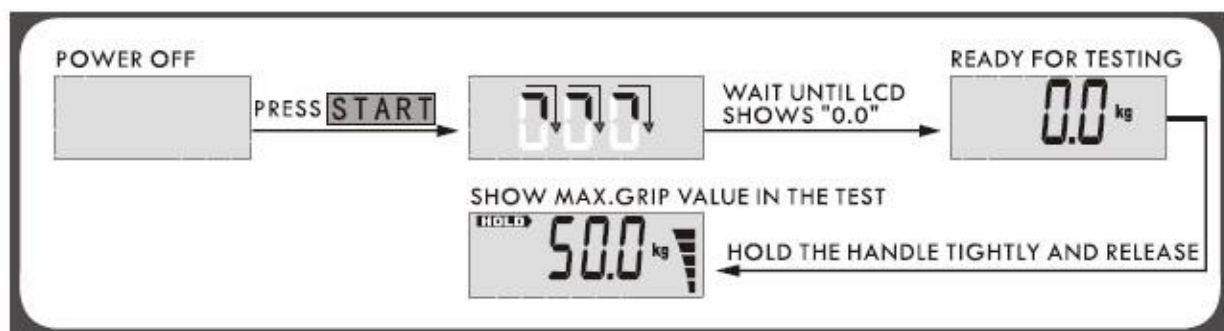

PARA GUARDAR EL RESULTADO DE LA PRUEBA



Presiones el botón Después de guardar, el dinamómetro volverá de nuevo a modo de prueba.

4.- INSTRUCCIONES PARA EL USO

INTRODUCCIÓN BREVE

Este dinamómetro puede ser utilizado para los gimnastas, jugadores de tenis, escaladores y también sirve como un dispositivo de entrenamiento recuperándose de una lesión muscular, como parte de la Fisioterapia con las siguientes características especiales:

1. El poder de la alta precisión midiendo, dando momentánea lectura digital de la fuerza de agarre.
2. Auto captura de potencia máxima adherencia lograda y visualización del valor.

3. Evaluación de los resultados por grupos de edad y sexo.
4. Guardar / Almacenar y recuperación del resultado para los diferentes individuos de usuario.


ESPECIFICACIONES

1. Unidad: Kg / Lb
2. Máx. Capacidad: 90kg/198lb
3. División: 0.1kg / 0.2lb
4. Energía: 2 X 1.5V. Pilas AAA
5. Tolerancia: $\pm 0.5\text{kg}$ / 1lb
6. Entorno de funcionamiento: Temperatura: 0-35°C; Humedad Relativa: 30-90%


CARACTERÍSTICAS

1. Principio de diseño: la biónica, la ergonomía
2. Mango ajustable, conveniente para los usuarios de diferentes edades
3. Diseño de moda
4. Equipado con sensor de tensión de alta precisión
5. 0,8 "(21 mm) Dígitos LCD
6. Multi-funciones, incluyendo la configuración de datos de usuario, pruebas de adherencia; comparación de resultados de la prueba, guardar y recuperar.

● ESQUEMA

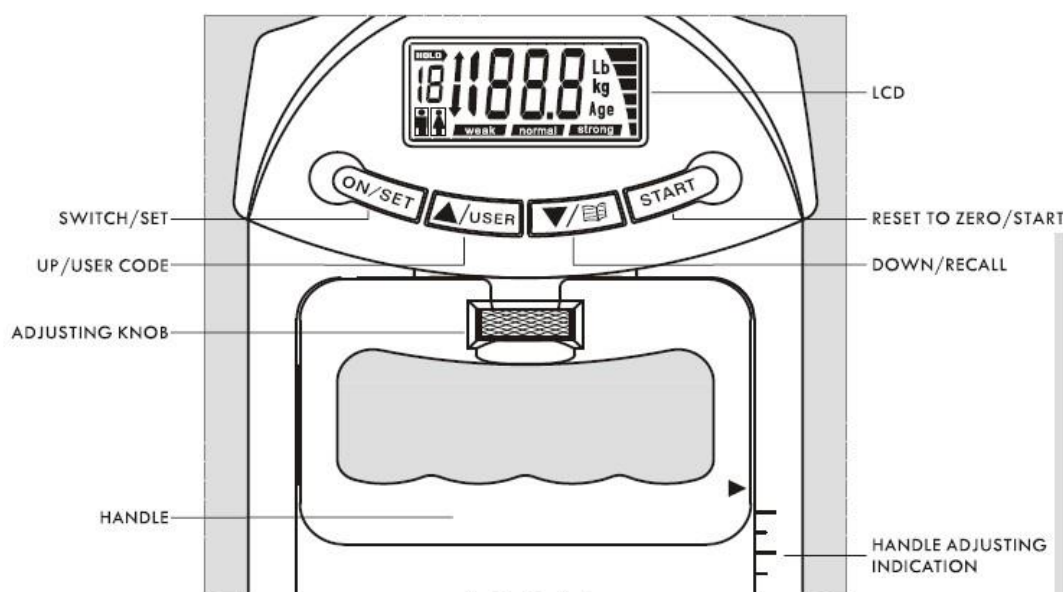


- PARA CAMBIAR LAS PILAS

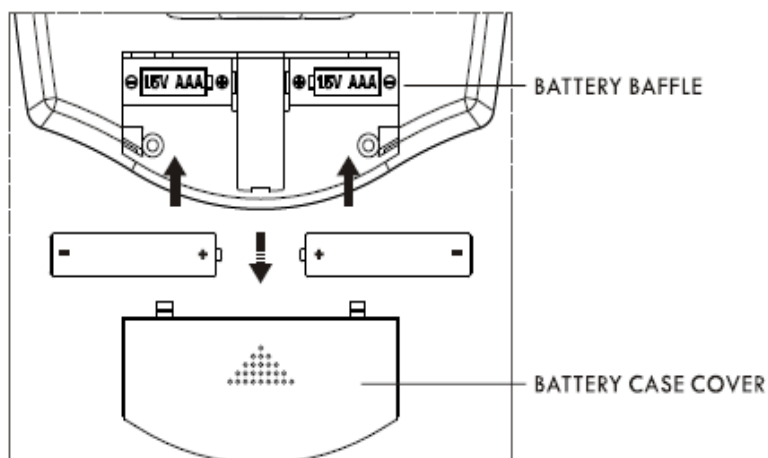

1. Abra la cubierta de la caja de la batería en la parte posterior del dinamómetro.
2. Saque las baterías usadas;
3. Instalar nuevas baterías poniendo un lado del deflector baterías y presionando hacia abajo el otro lado. Tenga en cuenta la polaridad.

- LCD. DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

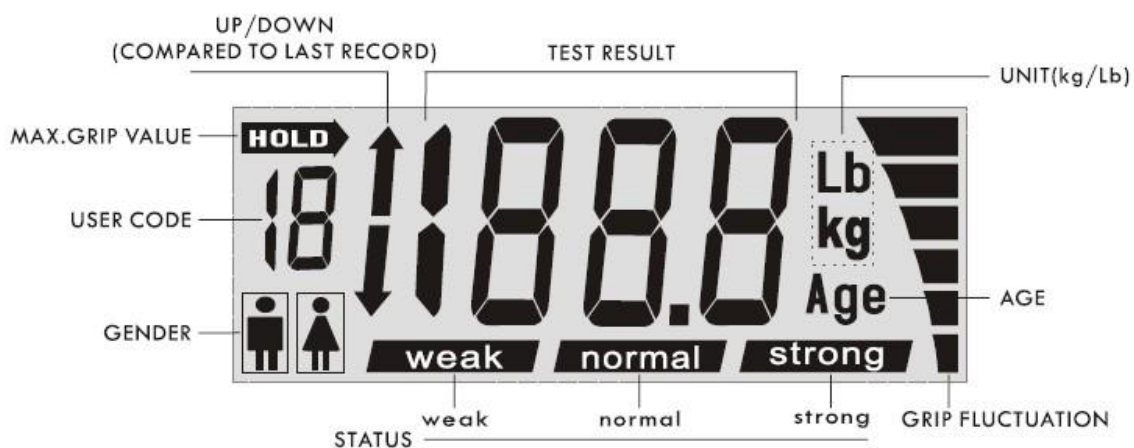


- AJUSTE PREVIO



Antes de usar, se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo la palanca girando el mando a la derecha o a la izquierda para ajustar obtener una compresión ideal.

Por ejemplo: el usuario con una mano grande puede ajustar el mango hacia arriba, girando a la derecha la perilla de ajuste.


- PARA ESTABLECER LOS PARÁMETROS DE USUARIO

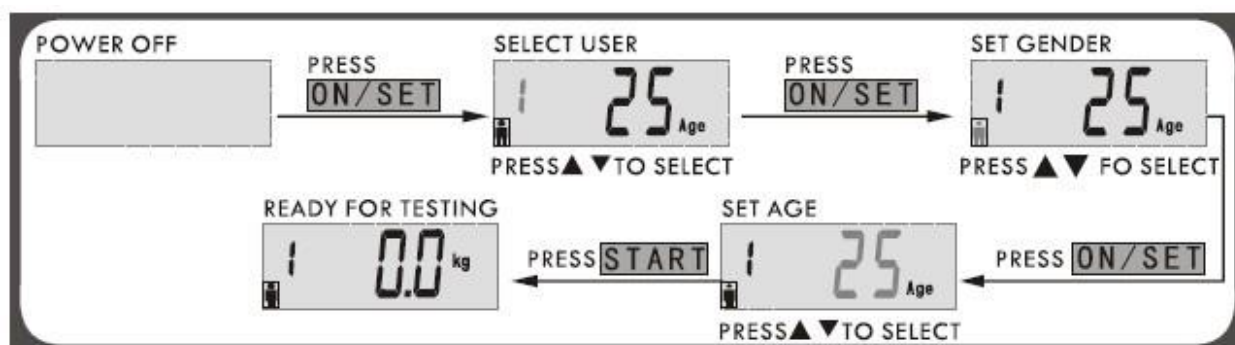

El dinamómetro tiene capacidad para 20 perfiles diferentes en el que puede establecer el sexo y la edad, con esto podrá obtener el resultado de la prueba: Débil, normal o fuerte automáticamente al finalizar la prueba.

Puede establecer 6 perfiles, donde tenga en cuenta la edad: jóvenes, mediana edad y mayores, y el sexo para hombres como para mujeres.

- PARA PONER A PRUEBA EN EL MODO DE MEMORIA DE USUARIO

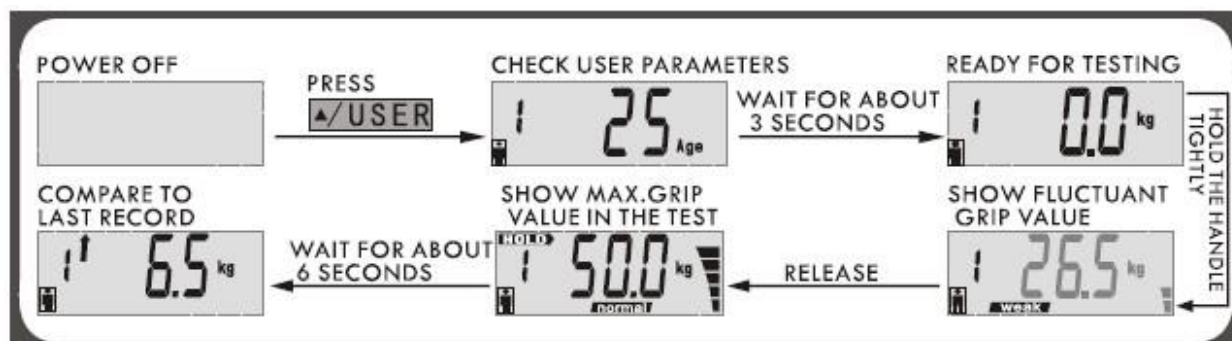

Después de la prueba, la pantalla LCD mostrará el código de usuario, el género, el valor max.grip, y el estado de valor grip (débil, normal, fuerte). Pulse el botón "ON / SET" 3 segundos para apagar. El Auto-apagado se produce si LCD muestra la misma lectura durante 20 segundos.


- GRABAR RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

- Anexo: estado físico de acuerdo con el resultado de la prueba propuesta por el dinamómetro.

EDAD	HOMBRE			MUJER		
	Débil	Normal	Fuerte	Débil	Normal	Fuerte
10-11	<12.6	12.6-22.4	<22.4	<11.8	11.8-21.6	<21.6
12-13	<19.4	19.4-31.2	<31.2	<14.6	14.6-24.4	<24.4
14-15	<28.5	28.5-44.3	<44.3	<15.5	15.5-27.3	<27.3
16-17	<32.6	32.6-52.4	<52.4	<17.2	17.2-29.0	<29.0
18-19	<35.7	35.7-55.5	<55.5	<19.2	19.2-31.0	<31.0
20-24	<36.8	36.8-56.6	<56.6	<21.5	21.5-35.3	<35.3
25-29	<37.7	37.7-57.5	<57.5	<25.6	25.6-41.4	<41.4
30-34	<36.0	36-55.8	<55.8	<21.5	21.5-35.3	<35.3
35-39	<35.8	35.8-55.6	<55.6	<20.3	20.3-34.1	<34.1
40-44	<35.5	35.5-55.3	<55.3	<18.9	18.9-32.7	<32.7
45-49	<34.7	34.7-54.5	<54.5	<18.6	18.6-32.4	<32.4
50-54	<32.9	32.9-50.7	<50.7	<18.1	18.1-31.9	<31.9
55-59	<30.7	30.7-48.5	<48.5	<17.7	17.7-31.5	<31.5
60-64	<30.2	30.2-48	<48.0	<17.2	17.2-31.0	<31.0
65-69	<28.2	28.2-44	<44.0	<15.4	15.4-27.2	<27.2
70-99	<21.3	21.3-35.1	<35.1	<14.7	14.7-24.5	<24.5

- PARA CONVERTIR LA UNIDAD

Presione ON/SET y verá como la unidad de medida cambia de Kg. a Lb.

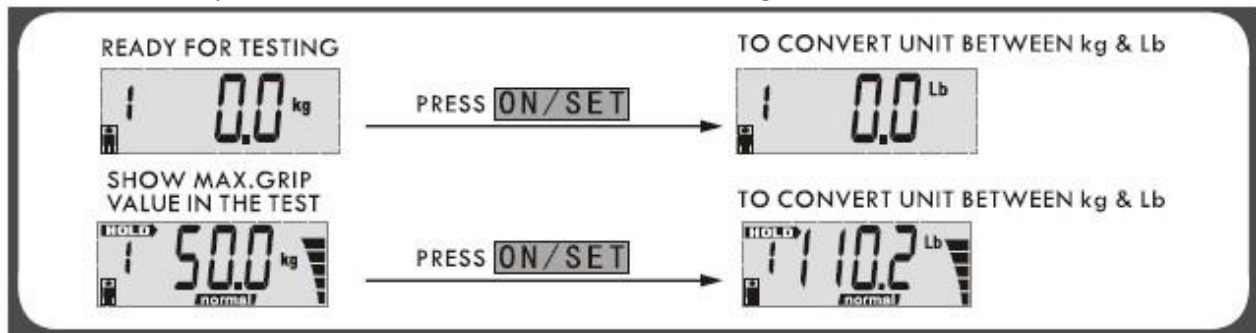

- PARA REINICIAR Y VOLVER A PROBAR

